

THAT DENTIST- LIKE CLEAN FEELING



Powered by

Jordan*





JORDAN CLEAN

– UUDEN SUKUPOLVEN SÄHKÖHAMMASHARJAT

Jordan Powered by Wilfa -sähköhammasharjat on kehitetty yhteistyössä kokeneen suunhoitotuotteiden ja hammasharjojen valmistajan Jordanin ja Norjan suurimman pienkodinkoneiden tuottajan Wilfan kanssa.

Jordan Clean -sarjan hammasharjoissa yhdistyvät huippuluokan akukesto, pohjoismainen design ja Soft Clean™ -teknologia, joka tarjoaa vertaansa vailla olevaa hampaiden puhdistusta.



JORDAN CLEAN


– OPTIMAALISTA HAMPAIDEN PUHDISTUSTA

Useat hammaslääkärit suosittelivat sähköhammasharjan käyttöä - eikä suotta. Jatkuva, oikeanlainen harjaava liike sekä optimaalisen kokoinen harjauspää varmistavat, että sähköhammasharjaa käytettäessä puhdistus on tarkkaa ja tehokasta.

Kehittäessämme Jordan Clean -sarjaa olemme yhdistäneet Jordanin vuosien aikana karttuneen kokemuksen ja tiedon harjaspäiden teknologiasta Wilfan asiantuntijuuteen luotettavien elektroniikkalaitteiden valmistajana.

SoftClean™ on täysin uudenlainen harjauspäissä käytettävä teknologia. Harjauspään koko on optimoitu puhdistamaan hampaat yksitellen. Lisäksi harjauspään harjakset on jaettu kolmeen puhdistusvyöhykkeeseen, joissa jokaisessa on erityyppiset harjakset. Tämän ansiosta sekä hampaat että ienrajat puhdistuvat tehokkaasti ja hellävaraisesti.

Jordan Clean -sarja nostaa akun keston ja kapasiteetin täysin uudelle tasolle. Sisäisellä litiumioniakulla varustettuja harjoja voidaan käyttää jopa kuukauden ajan yhdellä latauksella⁽¹⁾. Litiumakku tarjoaa paitsi suuremman kapasiteetin ja täyden tehon aina latauksen loppuun asti, myös pidemmän käyttöiän, sillä se kestää enemmän latauksia kuin perinteinen ladattava akku. Lisäksi litiumakuissa ei ole juuri lainkaan itsepurkautumis-ilmiötä, kuten useissa tavanomaisissa akuissa.

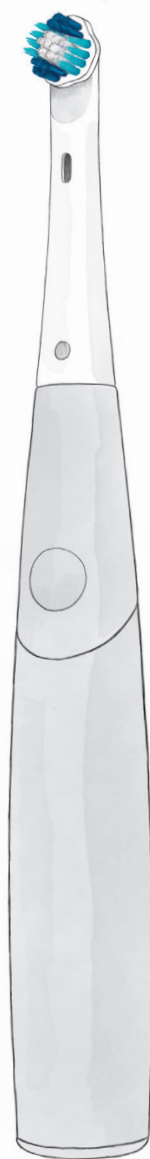

(1) Lukuunottamatta perusmallia Jordan Clean, jonka Ni-MH akku kestää 2 viikkoa täydellä latauksella.

..JA PALKITTUA MUOTOILUA!

Ainutlaatuisen SoftClean™-teknologian ja huippuluokan akkukapasiteetin lisäksi Jordan Clean -sarjan hammasharjoja luonnehtii pohjoismainen design. Muotoilu perustuu pohjoismaiseen selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen. Tyylikäs ja linjakas muotoilu auttaa myös pitämään sähköhammasharjan ja laturin puhtaana.

Jordan Clean -sarja on voittanut kansainväliset Reddot Design Award 2014 sekä iF Design Award 2015 -muotoilupalkinnot.



reddot award 2014
winner



DESIGN
AWARD
2015



PITKÄKESTOINEN AKKU

Wilfan litiumakkuteknologia tarjoaa ylivoimaisen akkukapasiteetin ja akunkeston. Ainoastaan 5 tunnin latauksella harjaat hampaitaisi kokonaisen kuukauden⁽²⁾ eli 120 minuuttia harjatessasi kaksi minuuttia aamuin illoin.

Litiumakun teho ei hiivu, vaan se antaa tehoa täysillä ja tasaisesti aina latauksen loppumiseen saakka. Lisäksi litiumakun käyttöikä on pitkä, sillä se kestää useampia latauksia kuin tavanomaiset akut.

Jordan Powered by Wilfa sähköhammasharjan mukana toimitetaan fiksu ja tyylikäs alusta, joka toimii myös lataustelineenä. Voit yhdistää lataustelineeseen irrotettavan USB-johdon ja ladata hammasharjan joko verkkovirrassa tai kannettavan tietokoneen tai muun latauslaitteen avulla⁽²⁾. Lataat sähköhammasharjasi siis yhtä helposti sekä kotona että matkalla.

Jordan
sähköhammasharja

Tavallinen
sähköhammasharja

(2) 5 tunnin lataus ja USB-latausmahdollisuus koskee malleja Clean Fresh, Premium ja Premium+. Tavanomaisen Ni-Mh akulla varustetun hammasharjan sekä Jordan Clean Plus & Travel -mallien täyteen lataaminen voi kestää 17-18 tuntia. Jordan Clean Travel -mallissa on USB-lataus, ei verkkovirtapistoketta.

(3) Pikalataus vain malleissa Clean Fresh, Premium ja Premium+.

PIKALATAUS

Jos et ehdi odottamaan akun täyteen latautumista viittä tuntia, saat jopa viikon edestä harjausaikaa vain 20 minuutin pikalatauksella⁽³⁾.


KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN DESIGN

Jordan Clean sähköhammasharjan ainutlaatuisen latausteknologian ansiosta vältyt johtovyhyhteiltä kylpyhuoneessa ja sähköhammasharjan voi jättää esille samalla tavalla kuin käsikäyttöisen hammasharjan. Lisäksi harjan täysin vedenpitävä design takaa sen, ettei sinun tarvitse välttää haastaviakaan olosuhteita.



SOFTCLEAN™

SoftClean™ -teknologia perustuu tehokkaiden, erityyppisten harjasten ainutlaatuiseseen yhdistelmään yhdessä harjuspäässä. Harjuspää on kooltaan pieni ja sopii erinomaisesti hampaan rakenteelle. Parhaan mahdollisen, perusteellisen ja hellävaraisen puhdistustuloksen varmistaa Jordan SoftClean™ -harjuspään kolme puhdistusvyöhykettä. Hampaan eri alueiden puhdistuksesta vastaavat harjakset on jaettu tyyppinsä mukaan kolmeen eri alueeseen keskelle, sivuille ja ylä/alapuolelle:

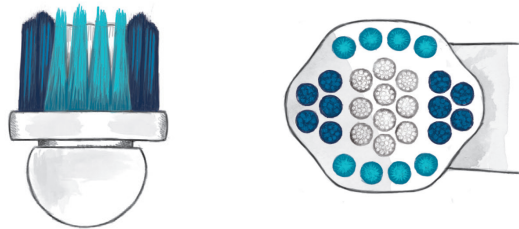

● HAMMASVÄLIT

Pyramidin muotoiset harjakset ulottuvat ahtaisiin paikkoihin ja puhdistavat plakin tehokkaasti.

● IENRAJA

Erittäin pehmeät kartiomaiset harjakset puhdistavat hellävaraisesti ja tehokkaasti ienrajan.


● HAMPAAN PINNAT

Korkealaatuiset harjakset harjuspään keskiössä puhdistavat tehokkaasti hampaan pinnan laajemmalta alueelta.

OSKILLOIVA LIIKE


Harjuspää pyörii nopeasti puolelta toiselle. Ovaalinmuotoinen harjuspää mahdollistaa laajan liikkeen hammasvälien puhdistukseen ja pienemmän liikkeen ienrajaan, mikä vähentää ikenen ärsytystä.

Jordan Cleanin standardi oskillointinopeus on 8,800 rpm, tosin Jordan Clean Premium ja Premium+ malleissa oskillointinopeus on jopa 10,000 rpm korkeimmalla nopeusasetuksella.

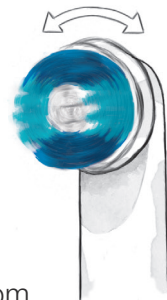

PUHTAAT HAMPAAT, TERVEET IKENET

Nämä seikat liittyvät kiinteästi yhteen: pitääksesi huolta hampaistasi, sinun tulee pitää huolta ikenistäsi.

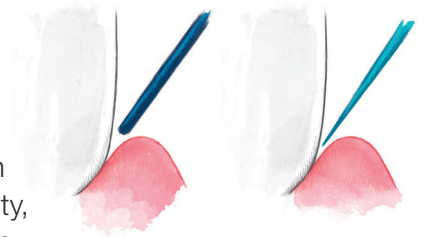

Tavanomainen harjuspää vasemmalla ja kartiomainen Jordan SoftClean™ harjas oikealla.

SoftClean™ on suunniteltu huolehtimaan sekä hampaista että ikenistä. Terävöitetty, kartiomainen harjuspää yltää helpommin koko hampaan ympärille ja puhdistaa myös ienrajat tehokkaasti. Pehmeä, kartiomainen harjas on lisäksi pyöreää harjuspäätä pinta-alaltaan pienempi, joten se on tutkitusti hellävaraisempi ikenille.



Kartiomainen Jordan SoftClean™ harjas




Tavanomainen pyöreä harjuspää

HUIPPULAADUKKAAT HARJAKSET

Jordanin vuosien aikana karttuneen ammattitaidon ja tiedon ansiosta olemme kehittäneet harjuspäät, joiden huippulaadukkaat harjakset puhdistavat optimaalisesti ja hellävaraisesti.

Harjakset on valmistettu erittäin laadukkaasta materiaalista. Dupont PA6.12 säikeet yhdistettynä eri ominaisuuksilla varustettuihin säikeisiin, kuten Pedex Structure ja Pedex Spiral Magic takaavat, että jopa mikroskooppisella tasolla harjuspäämme ovat huippuluokkaa.

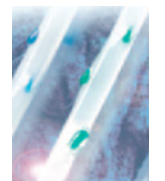

Mikroskooppinen kuva Sensitive ja Whitening harjuspäiden säikeistä




Mikroskooppinen kuva Whitening harjuspäiden säikeistä

SOFTCLEAN™ HARJAUSPÄÄT


HAMMASLÄÄKÄRIT SUOSITTELEVAT, ETTÄ HARJAUSPÄÄ VAIHDETAAN UUTEEN KOLMEN KUUKAUDEN VÄLEIN

Valitse omiin tarpeisiisi soveltuva harjauspää ja vaihda se säännöllisesti. Näin pidät hampaasi ja ikenesi puhtaina ja terveinä.

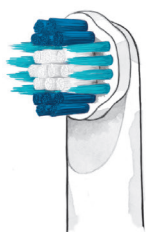


⊙ CLEAN

Tehokas harjauspää laadukkailla harjaksilla ja ainutlaatuisella harjasyhdistelmällä puhdistaa hampaasi ja ikenesi tehokkaasti ja hellävaraisesti.

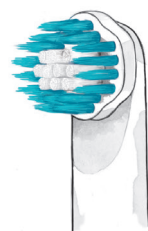

⊙ SENSITIVE

Erityisen hellävaraiseen puhdistukseen suunnitellut harjakset ovat pehmeitä, joustavia ja ohuita. Kartiomaisten harjaspäiden avulla puhdistetaan myös ahtaat paikat ja varsinkin ienraja, joihin tavanomaiset pyöristetyt harjaspäät eivät yllä. Keskiössä olevat harjakset on valmistettu materiaalista, johon on lisätty harjaustehoa vahvistavia hiukkasia.

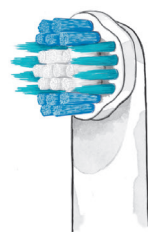


* WHITENING

Tämän harjauspään erityiset Jordan WhiteTech™⁽⁴⁾ harjakset poistavat plakkia ja pintavärjäytymiä hampaan pinnalta erittäin tehokkaasti. Hammas-tahnan kanssa käytettynä nämä harjakset vaikuttavat värjäytymien muodostumista vastaan jättäen hampaat luonnollisen valkoiseksi. Reunalla olevat spiraalimaiset harjakset levittävät hammastahnaa tehokkaasti ja vahvistavat puhdistusominaisuuksia. Keskiössä olevien harjasten materiaaliin on lisätty harjaustehoa vahvistavia hiukkasia.

(4) Jordan WhiteTech™-teknologia koostuu 2-komponenttisäikeistä harjauspään keskiössä ja ulkoreunoilla. Säikeiden terävät reunat ehkäisevät tummentumien muodostumista ja kierretty muoto helpottaa harjasten jakautumista laaja-alaisesti hampaan pinnalla.


KUINKA KÄYTÄT JORDAN CLEAN -SÄHKÖHAMMASHARJAA

On suositeltavaa ladata akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Aseta harjauspää harjaan kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes harjauspää naksahda paikalleen; harjakset osoittavat suoraan eteenpäin ja takana olevat merkkiviivat ovat linjassa. Laita hammastahnaa harjauspäähän ja pidä harjaa hammasta vasten 45 asteen kulmassa. Käynnistä hammasharja ja liikuta sitä hitaasti hampaan yli. Sähköhammasharjaa käytettäessä on tärkeää harjata hampaat yksi hammas kerrallaan.

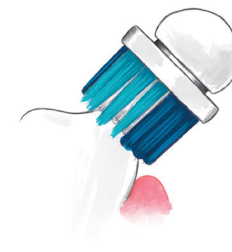

KÄYTÄ TARPEEKSI AIKAA

Hampaita suositellaan harjattavan kerrallaan ainakin 2 minuuttia. Suun jokaiseen neljään alueeseen (ylähampaat oikealla ja vasemmalla sekä alahampaat oikealla ja vasemmalla) tulisi käyttää 30 sekuntia kuhunkin. Jordan Clean -sarjan hammasharjoissa on sisäänrakennettu ajastin, joka värähtää aina 30 sekunnin välein.

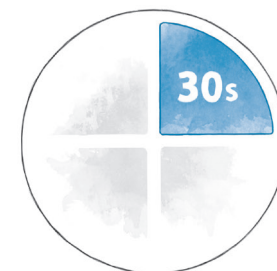

ÄLÄ HARJAA LIIAN KOVAA

Jos harjaat hampaitasi liian kovaa, voit vahingoittaa kiillettä ja varsinkin ikeniäsi. Jordan Clean -sarjan hammasharjoissa on painetunnistin, joka huomauttaa jos harjaat liian kovaa painaen⁽⁵⁾.

PUHDISTUS

Harjauksen jälkeen poista harjauspää harjasta, huuhtelee se kokonaan ja poista hammastahnan jäämät. Hammasharjan varsi on 100% vedenkestävä ja voidaan myös huuhdella vedellä.

(5) Painetunnistin vain malleissa Clean Fresh, Premium and Premium+.

CLEAN

TEHOKASTA PUHTAUTTA HYVÄLLÄ AKUNKESTOLLA

Jordan Clean on sarjan perusmalli perinteisellä Ni-MH akulla. Voit käyttää tätä harjaa kaikkien SoftClean™ -harjauspäiden kanssa: Clean, Sensitive ja Whitening. Tämän sähköhammasharjan pyörivä liike ja SoftClean™ -teknologia varmistavat erinomaisen lopputuloksen ja hellävaraisen puhdistuksen myös ikenille.

Hammasharjan nikkelimetallihydridiakun kapasiteetti antaa sinulle 2 viikon harjausajan täydellä latauksella. Harjan 2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan suositellun ajan. Akun lataustason merkkivalo huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa latausta, ja kun akku on täynnä.



KORKEA NOPEUS

Jordan Clean hammasharjan nopeus tarjoaa oskilloivaa liikettä 8,800 rpm (TB-60W) / 7,800 rpm (TB-50W)

PITKÄÄN KESTÄVÄ AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean tarjoaa kaksi viikkoa harjausaikaa ennen kuin akku on ladattava uudelleen. Tämä vastaa 60 minuuttia harjausta, oletuksella 2 minuuttia joka aamu ja ilta.



2 VIIKON
AKKU-
KAPASITEETTI



1 NOPEUS
8,800 RPM
MALLI: TB-60W



1 NOPEUS
7,800 RPM
MALLI: TB-50W

MALLI: TB-50W
TUOTENRO: 604114
EAN: 7044876041142
MYyntIERÄ: 6KPL

MALLI: TB-60W
TUOTENRO: 604103
EAN: 7044876041036
MYyntIERÄ: 6KPL

CLEAN PLUS

PUHTAAT HAMPAAT KAHELLE NOPEUSASETUKSELLE JA HUIKEALLA LITIUMAKUN KAPASITEETILLA

Jordan Clean Plus on sähköhammasharja, joka tarjoaa puhtaan tunteen kuin hammaslääkärikäynnin jälkeen. Ainutlaatuinen harjasyhdistelmä SoftClean™ -teknologialla varustetussa harjuspäässä tarjoaa tehokkaan ja myös ikenille hellävaraisen puhdistuksen.

Jordan Clean Plus -mallissa on kaksi nopeusasetusta, joiden välillä voit valita käynnistyspainiketta painamalla ja pitämällä pohjassa noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran.

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan 2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan värähtämällä 30 sekunnin välein. Akun lataustason merkkivalo huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa latausta, ja kun akku on täynnä.



1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI



2 NOPEUTTA
7,200/8,800
RPM

MALLI: TBPL-110W
TUOTENRO: 604115
EAN: 7044876041159
MYyntierä: 6KPL



KAKSI NOPEUSASETUSTA

Voit valita itsellesi sopivimman pyörintänopeuden. Pidä käynnistyspainiketta pohjassa vaihtaaksesi nopeuden 8,800 ja 7,200 rpm:n välillä.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean Plus tarjoaa kokonaisen kuukauden harjausaikaa. Voit siis harjata 120 minuuttia eli 2 minuuttia aamuin illoin, ennen kuin akku on ladattava uudelleen. Akun täyteen lataaminen kestää 17 tuntia.

CLEAN PLUS

PUHTAAT HAMPAAT KAHDELLA NOPEUSASETUKSELLA JA HUIKEALLA LITIUMAKUN KAPASITEETILLA

Jordan Clean Plus on sähköhammasharja, joka tarjoaa puhtaan tunteen kuin hammaslääkärikäynnin jälkeen. Ainutlaatuinen harjasyhdistelmä SoftClean™ -teknologialla varustetussa harjauspäässä tarjoaa tehokkaan ja myös ikenille hellävaraisen puhdistuksen.

Jordan Clean Plus -mallissa on kaksi nopeusasetusta, joiden välillä voit valita käynnistyspainiketta painamalla ja pitämällä pohjassa noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran.

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan 2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan värähtämällä 30 sekunnin välein. Akun lataustason merkkivalo huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa latausta, ja kun akku on täynnä.

KUUKAUDEN HYMY SINULLE JA HÄNELLE!

Jordan Clean Plus TBPL-120W on saatavilla myös tuplapakkauksena, joka sisältää kaksi sähköhammasharjaa ja yhden lataustelineen.



1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI



2 NOPEUTTA
8,200/9,800
RPM

MALLI: TBPL-120W
TUOTENRO: 604102
EAN: 7044876041029
MYyntIERÄ: 6KPL

TUPLAPAKKAUS:
MALLI: TBPL-120W TWIN PACK
TUOTENRO: 604113
EAN: 7044876041135
MYyntIERÄ: 6KPL





KAKSI NOPEUSASETUSTA

Voit valita itsellesi sopivimman pyörintänopeuden. Pidä käynnistyspainiketta pohjassa vaihtaaksesi nopeuden 9,800 ja 8,200 rpm:n välillä.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean Plus tarjoaa kokonaisen kuukauden harjausaikaa. Voit siis harjata 120 minuuttia eli 2 minuuttia aamuin illoin, ennen kuin akku on ladattava uudelleen. Akun täyteen lataaminen kestää 17 tuntia.

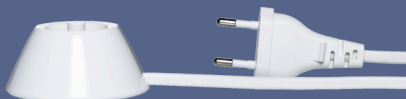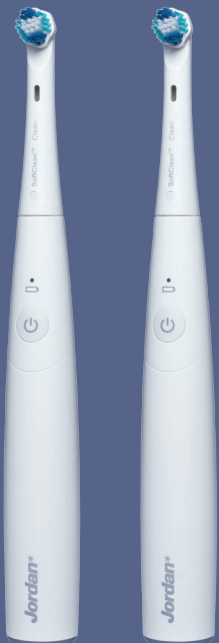

CLEAN TRAVEL

PALJON MATKUSTAVAN SÄHKÖHAMMASHARJA LITIUMAKULLA JA ÄLYKKÄÄLLÄ LATAUSTEKNOLOGIALLA

Jordan Clean Travel sähköhammasharja pitää hampaat puhtaana sekä kotona ja matkoilla. Harjauksen ainutlaatuinen harjasyhdistelmä SoftClean™ -teknologialla tarjoaa tehokkaan ja myös ikenille hellävaraisen puhdistuksen.

Jordan Clean Travel -harjan mukana on kompakti matkakotelo, jonka kanssa harja on kätevä ottaa mukaan matkalle. Hammasharjan lataat USB-latausjohdolla suoraan harjan pohjasta. Mukana toimitettava micro-USB adapteri mahdollistaa latauksen monipuolisesti erilaisten kannettavien laitteiden, kuten tietokoneen, puhelimen tai tabletin avulla.

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan 2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan värähtämällä 30 sekunnin välein. Akun lataustason merkkivalo huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa latausta ja kun akku on täynnä.

Jordan Clean Travel -mallissa on kaksi nopeusasetusta, joiden välillä voit valita käynnistyspainiketta painamalla ja pitämällä pohjassa noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran.



1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI



2 NOPEUTTA
7,200/8,800
RPM

MALLI: TBPL-100GY
TUOTENRO: 604116
EAN: 7044876041166
MYyntierä: 6KPL



KAKSI NOPEUSASETUSTA

Voit valita itsellesi sopivimman pyörintänopeuden. Pidä käynnistyspainiketta pohjassa valitaksesi nopeus 8,800 tai 7,200 rpm.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean Travel tarjoaa kuukauden harjausajan. Voit siis harjata 120 minuuttia eli 2 minuuttia aamuin illoin, ennen kuin akku on ladattava uudelleen. Harjan lataat USB-johdolla. Akun täyteen lataaminen kestää 18 tuntia.



CLEAN FRESH

PUHTAAT HAMPAAT KOTONA JA MATKALLA - KAKSI NOPEUS-ASETUSTA, LITIUMAKKU JA IRROTETTAVA USB-LATURI

Jordan Clean Fresh on täysin uudentyyppinen sähköhammasharja. Sen pyörivä liike ja SoftClean™ -teknologia varmistavat erinomaisen lopputuloksen ja hellävaraisen puhdistuksen myös ikenille. Jordan Clean Fresh on saatavilla neljässä raikkaassa värissä.

Jordan Clean Fresh -mallissa on kaksi nopeusasetusta, joiden välillä voit valita käynnistuspainiketta painamalla ja pitämällä pohjassa noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran.

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan 2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan ja painetunnistin huomauttaa, jos harjaat liian kovaa. Akun lataustason merkkivalo huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa latausta, ja kun akku on täynnä.

Irrotettava USB-laturi helpottaa käyttöä. Voit unohtaa johtovyehdit ja jättää muotoilupalkitun hammasharjan vain alustassaan esille kylpyhuoneeseen!

Lisävarusteena saatavassa matkakotelossa sähköhammasharjasi kulkee mukana pitäen hampaasi puhtaana myös reissussa! Koteloon mahtuu hammasharjan lisäksi kaksi vaihtopäätä.

MALLI: TB120-B (SININEN)
TUOTENRO: 604109
EAN: 7044876041098
MYyntIERÄ: 6KPL

MALLI: TB120-GR (VIHREÄ)
TUOTENRO: 604111
EAN: 7044876041111
MYyntIERÄ: 6KPL

MALLI: TB120-P (PINKKI)
TUOTENRO: 604108
EAN: 7044876041108
MYyntIERÄ: 6KPL

MALLI: TB120-GY (HARMAA)
TUOTENRO: 604110
EAN: 7044876041104
MYyntIERÄ: 6KPL

MATKAKOTELO
MALLI: TCASET-120
TUOTENRO: 604112
EAN: 7044876041128
MYyntIERÄ: 6KPL



KAKSI NOPEUSASETUSTA

Voit valita itsellesi sopivimman pyörintänopeuden. Pidä käynnistuspainiketta pohjassa vaihtaaksesi nopeuden 9,800 ja 8,200 rpm:n välillä.

PAINETUNNISTIN

Painetunnistin huomauttaa, jos harjaat liian kovaa.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean Fresh tarjoaa kokonaisen kuukauden harjausaikaa. Voit siis harjata 120 minuuttia eli 2 minuuttia aamuin illoin, ennen kuin akku on ladattava uudelleen. Akun täyteen lataaminen kestää 5 tuntia, mutta jo 20 minuutin lataus riittää antamaan viikon verran harjausaikaa.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN, JOHTOVYEHDITÖN DESIGN

Pitkäkestoisen akun ja irrotettavan USB-laturin ansiosta voit säilyttää johdon muualla kuin kylpyhuoneessa ja jättää vain hammasharjan esille.



1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI



2 NOPEUTTA
9,800/8,200
RPM



IRROTETTAVA
USB-LATURI



PAINETUNNISTIN

CLEAN PREMIUM

UUSI STANDARDI SÄHKÖHAMMASHARJOILLE ON ASETETTU

Jordan Clean Premium sähköhammasharjan pyörivä liike ja SoftClean™ -teknologia varmistavat erinomaisen lopputuloksen ja hellävaraisen puhdistuksen myös ikenille. Hopeanvärisen, tyylikkään hammasharjan mukana toimitetaan matkakotelo, jossa on tilaa kahdelle harjauspäälle.

Jordan Clean Premium -mallissa on kolme nopeusasetusta, jotka on sovitettu kullekin harjauspäälle: Clean, Sensitive ja Whitening. Valtaksesi nopeuden, paina käynnistuspainiketta ja pidä sitä pohjassa noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran.

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan 2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan ja painetunnistin huomauttaa, jos harjaat liian kovaa. Akun lataustason merkkivalo huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa latausta, ja kun akku on täynnä.

Irrotettava USB-laturi helpottaa käyttöä. Voit unohtaa johtovyehdit ja jättää muotoilupalkitun hammasharjan vain alustassaan esille kylpyhuoneeseen!

Tyylikäs matkakotelo varmistaa harjan siistin ja hygieenisen säilytyksen myös matkalla. Korkean akkukapasiteetin ansiosta voit jättää laturin kotiin ollessasi matkalla kuukautta lyhyemmän ajan.



1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI



3 NOPEUTTA
10,000/9,000/
8,000 RPM



IRROTETTAVA
USB-LATURI




PAINETUNNISTIN



MATKAKOTELO

MALLI: TBP-120S
TUOTENRO: 604101
EAN: 7044876041012
MYYNTIERÄ: 6KPL

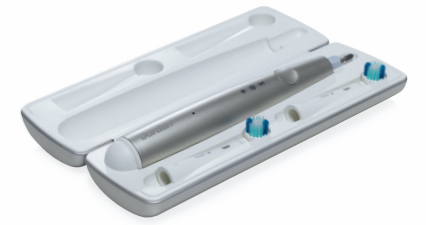

KOLME NOPEUSASETUSTA

Pidä käynnistuspainiketta pohjassa vaihtaaksesi nopeuden 10,000, 9,000 ja 8,000 rpm:n välillä. Voit valita itsellesi sopivimman pyörintänopeuden.

PAINETUNNISTIN

Painetunnistin huomauttaa, jos harjaat liian kovaa.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean Premium tarjoaa kokonaisen kuukauden harjausaikaa. Voit siis harjata 120 minuuttia eli 2 minuuttia aamuin illoin, ennen kuin akku on ladattava uudelleen. Akun täyteen lataaminen kestää 5 tuntia, mutta jo 20 minuutin lataus riittää antamaan viikon verran harjausaikaa.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN DESIGN, EI JOHTOVYYHTEJÄ

Pitkäkestoisen akun ja irrotettavan USB-laturin ansiosta voit säilyttää johdon muualla kuin kylpyhuoneessa ja jättää vain hammasharjan esille. Matkakotelossa on tilaa kahdelle vaihtopäälle.



CLEAN PREMIUM+

SARJAN HUIPPUMALLI JORDAN CLEAN PREMIUM+

Jordan Clean Premium+ sähköhammasharjan pyörivä liike ja SoftClean™ -teknologia varmistavat erinomaisen lopputuloksen ja hellävaraisen puhdistuksen myös ikenille. Erittäin tyylikäs musta viimeistely ja mukana toimitettava, integroidulla USB-laturilla varustettu matkakotelo tekevät Jordan Clean Premium+ harjasta sarjan huippumallin.

Jordan Clean Premium+ mallissa on kolme nopeusasetusta, jotka on sovitettu kullekin harjauspäälle: Clean, Sensitive ja Whitening. Valitaksesi nopeuden, paina käynnistuspainiketta ja pidä sitä pohjassa noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran.

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan 2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan ja painetunnistin huomauttaa, jos harjaat liian kovaa. Premium+ mallissa on akun lataustason ilmaisimien, joka näyttää lataustason jatkuvasti.

Irrotettava USB-laturi helpottaa käyttöä. Voit unohtaa johtovyehdit ja jättää muotoilupalkitun hammasharjan vain alustassaan esille kylpyhuoneeseen!

Tyylikäs matkakotelo varmistaa harjan siistin ja hygieenisen säilytyksen myös matkalla. Voit ladata hammasharjan helposti matkakotelossaan liittämällä USB-johdon kotelon ulkopuolella sijaitsevaan USB-kytkimeen.



1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI



3 NOPEUTTA
10,000/9,000/
8,000 RPM



IRROTETTAVA
USB-LATURI



PAINETUNNISTIN



MATKAKOTELO
USB-LATURILLA

MALLI: TBPX-120B
TUOTENRO: 604100
EAN: 7044876041005
MYYNTIERÄ: 6KPL



KOLME NOPEUSASETUSTA

Pidä käynnistuspainiketta pohjassa vaihtaaksesi nopeuden 10,000, 9,000 ja 8,000 rpm:n välillä. Voit valita itsellesi sopivimman pyörintänopeuden.

PAINETUNNISTIN

Painetunnistin huomauttaa, jos harjaat liian kovaa.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean Premium+ tarjoaa kokonaisen kuukauden harjausaikaa. Voit siis harjata 120 minuuttia eli 2 minuuttia aamuin illoin, ennen kuin akku on ladattava uudelleen. Akun täyteen lataaminen kestää 5 tuntia, mutta jo 20 minuutin lataus riittää antamaan viikon verran harjausaikaa.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN DESIGN, EI JOHTOVYHTEJÄ

Pitkäkestoisen akun ja irrotettavan USB-laturin ansiosta voit säilyttää johdon muualla kuin kylpyhuoneessa ja jättää vain hammasharjan esille. Matkakotelossa on USB-laturi.

JORDAN VAIHTOPÄÄT

VALITSE HARJAUSPÄÄ TARPEESI MUKAAN

Kaikissa vaihtopäissä on Jordan SoftClean™ -teknologia, joka takaa tehokkaan ja hellävaraisen puhdistuksen.

Kaikkia Jordan Clean -vaihtopäitä voidaan käyttää kaikkien Jordan Powered by Wilfa -sähköhammasharjojen kanssa.



CLEAN

Normaali harjauspää tehokkaaseen ja hellävaraiseen puhdistukseen.



SENSITIVE

Erittäin hellävaraiseen, kuitenkin tehokkaaseen puhdistukseen.



WHITENING

Tehokkaaseen plakin ja pintavärjäytymien poistoon Sinulle, joka toivot luonnollisen valkoista hymyä.



2 CLEAN-HARJAUSPÄÄTÄ
MALLI: TBRF-2XC
TUOTENRO: 604107
EAN: 7044876041074
MYyntIERÄ: 12KPL

4 CLEAN-HARJAUSPÄÄTÄ
MALLI: TBRF-4XC
TUOTENRO: 604104
EAN: 7044876041043
MYyntIERÄ: 12KPL



2 SENSITIVE-HARJAUSPÄÄTÄ
MALLI: TBRF-2XS
TUOTENRO: 604106
EAN: 7044876041067
MYyntIERÄ: 12KPL

2 WHITENING-HARJAUSPÄÄTÄ
MALLI: TBRF-2XW
TUOTENRO: 604105
EAN: 7044876041050
MYyntIERÄ: 12KPL



Valkaiseva
WHITENING

Erittäin hellävarainen
SENSITIVE

Normaali
CLEAN



Jordan*

Powered by



MAAHANTUONTI SUOMESSA:
OY WILFA SUOMI AB
ASIAKASPALVELU@WILFA.FI
PUH. 09 680 34 80
WWW.WILFA.FI/JORDAN